




TERMÉKLEÍRÁS

A TA60V egy állatkórházakban használt, csúcskategóriás altatógép. A termék tervezése az aneszteziológusok igényeit helyezi előtérbe, és teljesen szakít a hagyományos állatorvosi altatógépek kizárólag a gyártási költségekre összpontosító tervezési szemléletével.

A termékszerkezet és az áramköri modulok innovatív kialakításának köszönhetően a TA60V összes nyomásmérője és fő kezelőeleme a készülék előlapján kapott helyet, ami megkönnyíti a kezelést és a megfigyelést. Ugyanaz a modell többféle telepítést és alkalmazást tesz lehetővé: falra szerelve, asztali kivitelben és állványon is használható.

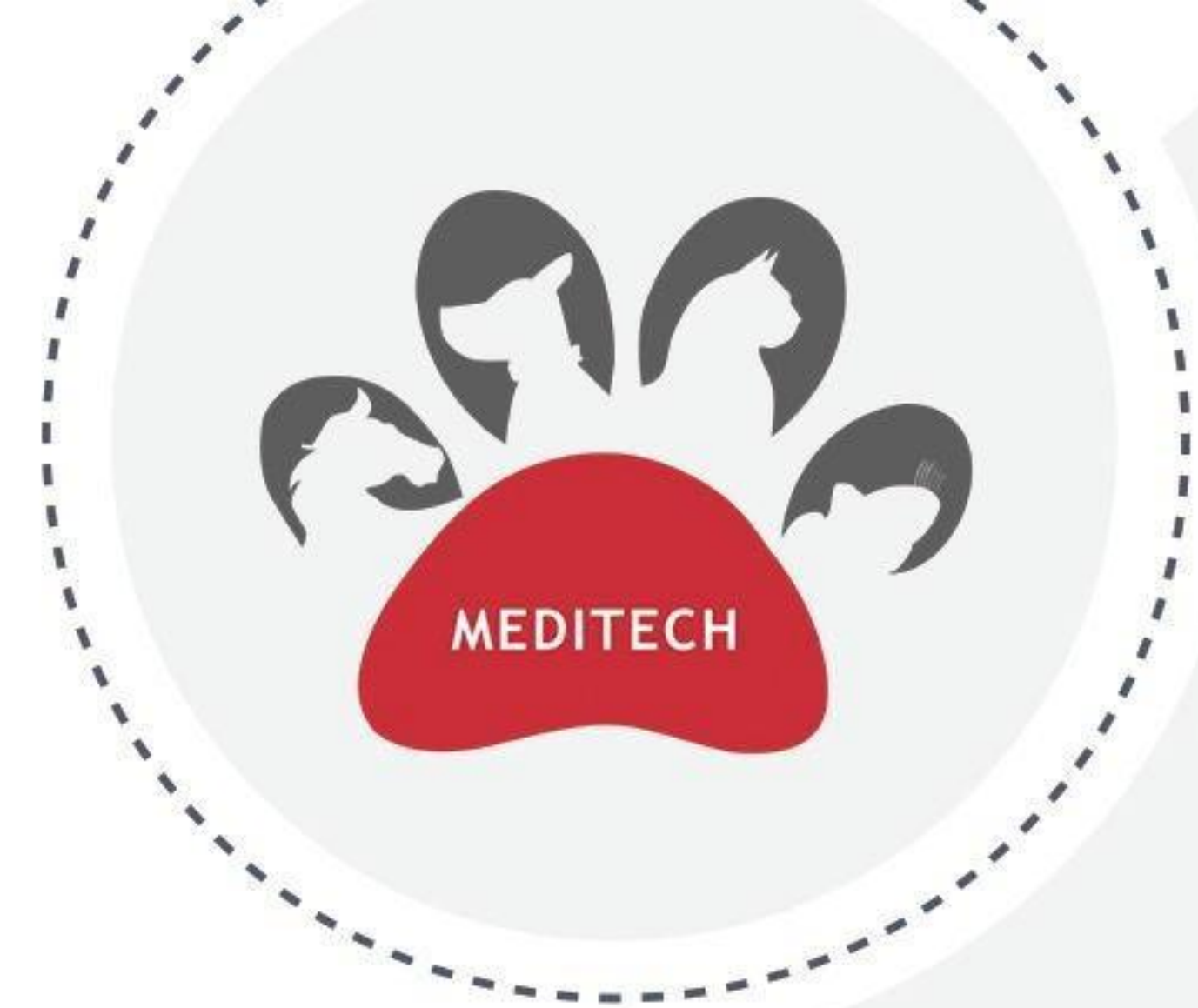


ÁLLATORVOSI ALTATÓGÉP TA60V

Többféle telepítési és alkalmazási mód,
kényelmes és biztonságos.



TERMÉKJELLEMZŐK

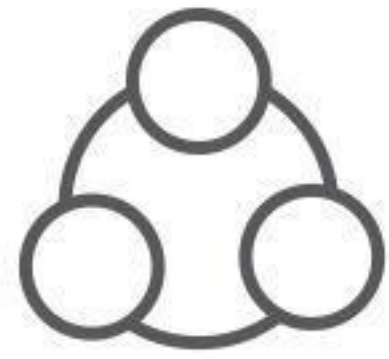


Sokoldalú alkalmazás, többféle telepítés

Visszalégzéses és nem visszalégzéses anesztézia; állványos, asztali és falra szerelt kivitel.

Selectatec® párologtató

Szabványos Selectatec® párologtató, egyszerű csere; szevoflurán, enflurán vagy izoflurán választható.

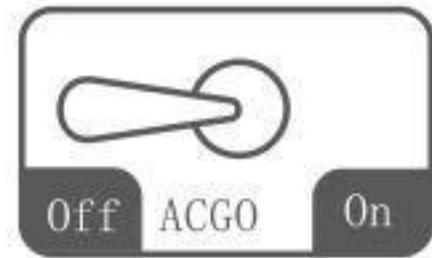


Független, nem visszalégzéses kör

Teljesen fém ACGO-kapcsoló és független ACGO-csatlakozó a visszalégzéses és a nem visszalégzéses anesztézia közötti egylépéses váltáshoz.

Oxigénnyomás-biztonság

Az oxigénnyomásmérőn az oxigénnyomás állapota jól látható; a beépített biztonsági szelep garantálja a termék biztonságát.

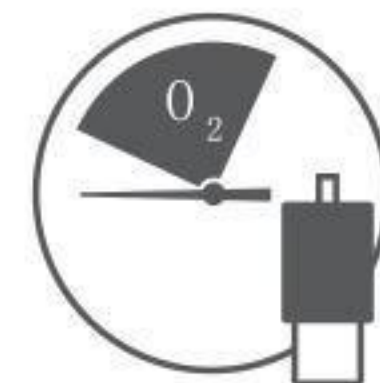


Légútnyomás-szabályozás

Előre kalibrált APL-szelep, a légúti nyomás egy lépésben beállítható; az APL-szelep gombja egy mozdulattal zárja a légutat; a függőleges légúti nyomásmérővel a légúti nyomás mindig kézben tartható.

Nagy kapacitású CO₂-abszorber tartály

Karos mechanizmus, rögzítés és oldás egyetlen mozdulattal; 1400 ml-es, extra nagy kapacitású CO₂-abszorber tartály.

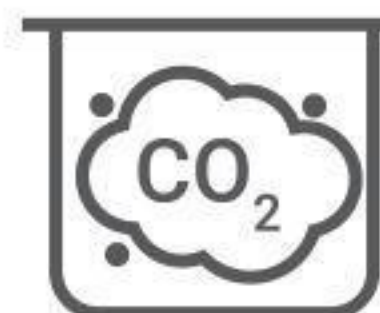

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

A gázkör specifikációi	
Gázforrás	Oxigén
Gázforrás nyomástartománya	280-600kpa/40-87psi
Csatlakozó típusa	NIST/DISS
Gázforrás nyomásmérője	0-1Mpa/0-140psi
Gázforrás biztonsági szelepe	Beépített
Áramlásmérő-tartomány	0-4L/min (egycsöves oxigén-áramlásmérő)
Párologtató-alap	Egy tartályhely, Selectatec

Specifikációk	
Méret	Altatógép állvány nélkül: Magasság 385 mm, szélesség 405 mm, hosszúság 265 mm Altatógép állvánnyal: Magasság 1230 mm, szélesség 510 mm, hosszúság 470 mm
Tömeg	≤10 kg (állvány, párologtató és egyéb tartozékok nélkül) ≤14 kg (párologtatóval, állvány és egyéb tartozékok nélkül) ≤22 kg (állvánnyal, párologtatóval és egyéb tartozékokkal)
Fedőlap max. terhelése	10 kg
Fogantyú	Egy fogantyú, a tető közepén

Légzőrendszer specifikációi	
Légúti nyomásmérő	-20cmH ₂ O~100cmH ₂ O
APL-szelep	Beállítási tartomány: 0 ~ 70 cmH ₂ O, egygombos zárással
CO ₂ -abszorber tartály	Térfogat: 1400 ml

Párologtató	
Párologtató típusa (töltési mód)	Izoflurán (Pour-Fill, Key-Fill, Easy-Fill) Enflurán (Pour-Fill, Key-Fill, Easy-Fill) Szevoflurán (Pour-Fill, Key-Fill, Easy-Fill, Quick-Fil)
Tömeg	Üres állapot: 4 kg ± 0,3 kg Töltött állapot: 5 kg ± 0,3 kg
Térfogat	Száraz kanóc: 300 ml ~ 360 ml Nedves kanóc: 240 ml ~ 300 ml A maximális és minimális jelölés között: 200 ml ~ 260 ml
Koncentrációtartomány	Izoflurán: 0-5 tf% Enflurán: 0-5 tf% Szevoflurán: 0-8 tf%
Koncentráció pontossága	±0,25 tf% vagy a beállított érték ±20%-a (a nagyobb)

MŰKÖDÉSI ELV

