




TooToo MediTech Co., Ltd.



Wi-Fi
(opcionális)

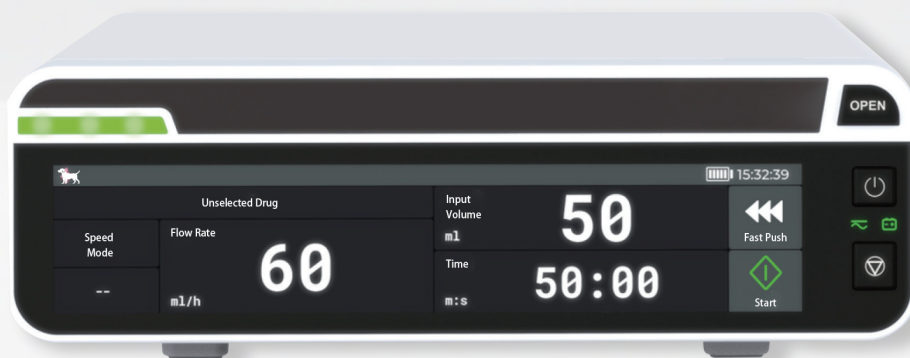

VP50

Állatorvosi infúziós rendszer

Okos érintés, biztonságos gyógyszerelés



7"-os teljes méretű érintőképernyő
teljesen új felhasználói élményt nyújt



Átlátszó ablakos kialakítás
könnyen tisztítható, a fecskendő állapota jól látható



Intuitív kezelőfelület
a műveletek 80%-a elvégezhető a főképernyőn



Prémium anyagok
49 fertőtlenítőszerrel kompatibilis

Cím: 3A, Phase II, Smart Home, Baolong Street,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86-755-28306385 Email: info@newtootoo.com
Web: www.newtootoo.com



Érintse meg a rugalmasságot

Rendkívüli érintőélmény

Az infúziós rendszer sorozat teljes méretű, színes érintőképernyővel és intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amely páratlan interaktív élményt nyújt.


- A 7 hüvelykes HD kapacitív érintőképernyő ugyanolyan gördülékeny kezelést tesz lehetővé, mint az okoseszközök a mindennapokban.

- Az intuitív kezelőfelület a kritikus paraméterek elegáns elrendezésével teszi egyszerűvé a kezelést.



Mindent egyben


Az sSP és sIP infúziós rendszer minden funkciót integrál, így sokféle klinikai célra használható.

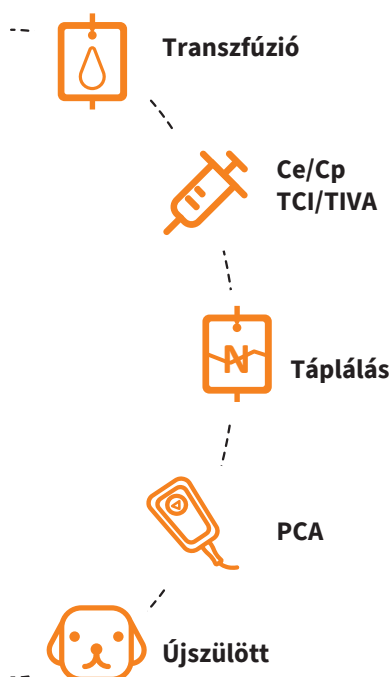




Dinamikus nyomásrendszer (DPS)

Sebességmérő stílusú kijelző számszerű nyomásértékkel a vezetéknyomás alakulásának gyors követéséhez.

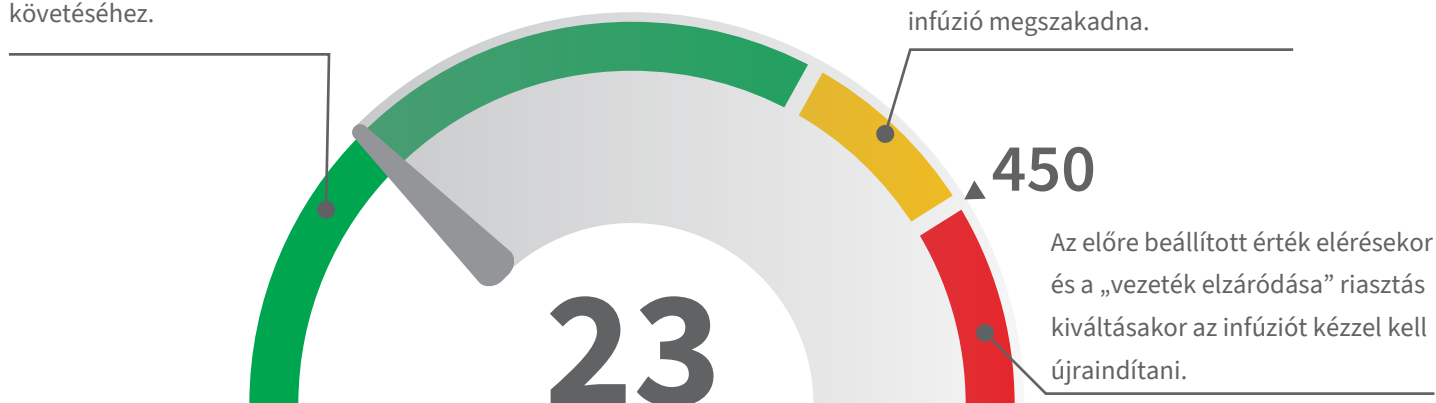


Vezetett riasztáskezelés

A jól látható riasztáskezelés révén a felhasználók gyorsan megtalálják és elhárítják a problémát.

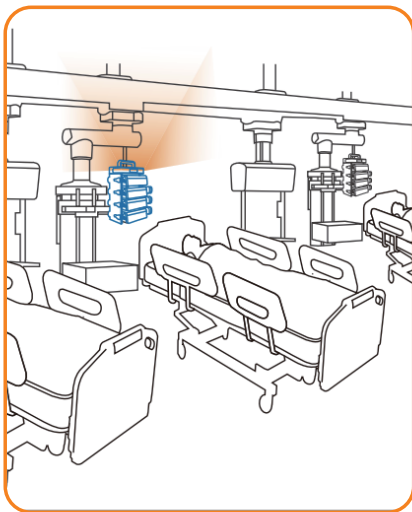


Az ágy melletti riasztás gyors azonosítása

az infúziós rendszer 270°-ban látható riasztófényével, már távolról.

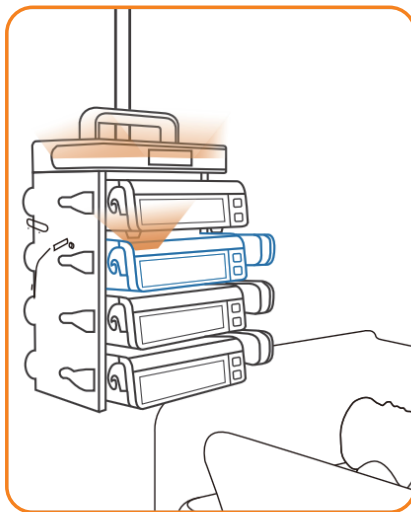

A pumpa gyors azonosítása

az infúziós rendszer hang- és fényjelzésével a betegágy mellett.

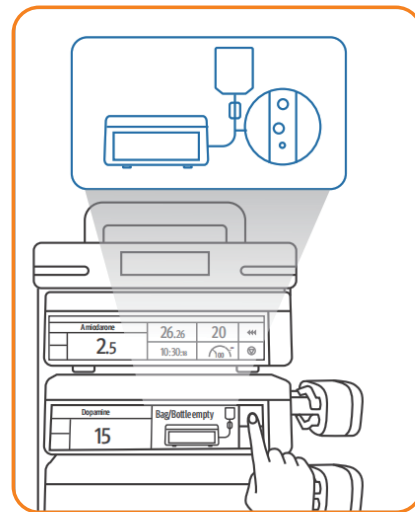

A probléma gyors azonosítása

a pumpán megjelenő útmutató animációval, amely segíti a hibaelhárítást



Biztonságos gyógyszerkezelés az infúzió teljes ideje alatt

Színkódrendszer

A gyógyszernevek színkódolása segít a megfelelő gyógyszer egyszerű kiválasztásában és ellenőrzésében.

. A SafeDose Info szoftver automatikusan beprogramozza az infúziós paramétereket, növelve a hatékonyságot.



SafeDose™ DERS

A SafeDose™ DERS csökkenti a gyógyszerelési hibákat: megakadályozza az előre beállított kemény határértékek túllépését, a lágy határértékek felülbírálásához pedig megerősítést kér.



Programozza be az egyedi gyógyszeradatokat színnel és határértékekkel.



Válassza ki egyszerűen a gyógyszert az áttekinthető kategóriák és a keresőfunkció segítségével.



Határérték elérésekor egyértelmű figyelmeztető üzenet jelenik meg.



Elkötelezetten a biztonság mellett

Innovatív technológiák a biztonságos gyógyszerelésért


SmartRapid

A SmartRapid jelentősen lerövidíti az indítási időt – a pumpa bekapcsolásától az első gyógyszercsepp beadásáig –, így biztosítja az időben történő infúziót.



Pontos és egyenletes teljesítmény

- Kiemelkedő pontosság: $sSP \leq +1,8\%$; $sIP \leq +5\%$
- Az áramlási sebesség már 0,01 ml/h-tól pontosan beállítható
- Már 1 ml-es fecskendővel is kompatibilis

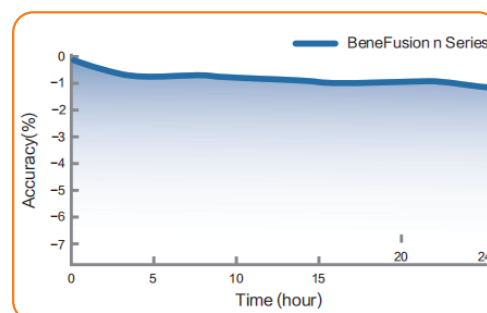

Integrált központi monitorozás

Az infúziós rendszer egy helyen biztosítja a kisállatok életjeleinek és infúziós kezelésének monitorozását, átfogó információt nyújtva a klinikai személyzetnek az ellátás minőségének javításához.



Zárt hurkú gyógyszerkezelés

Vonalkód-olvasóval segíti a klinikai személyzetet a gyógyszerelési hibák csökkentésében: automatikusan egyezteti a rendelést, javítva a munkafolyamat hatékonyságát.

